

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Kosmetischer Sessel 557A mit Küvetten



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl

Rev. A/04/2024


Bevor Sie den Kosmetikstuhl benutzen, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und befolgen Sie diese Schritte:

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz in Ordnung ist.
3. Stellen Sie den Kosmetikstuhl dort auf, wo er benutzt werden soll.

Achtung! Kinder und unerfahrene Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht in der Nähe des Kosmetikstuhls spielen.


Abmessungen:



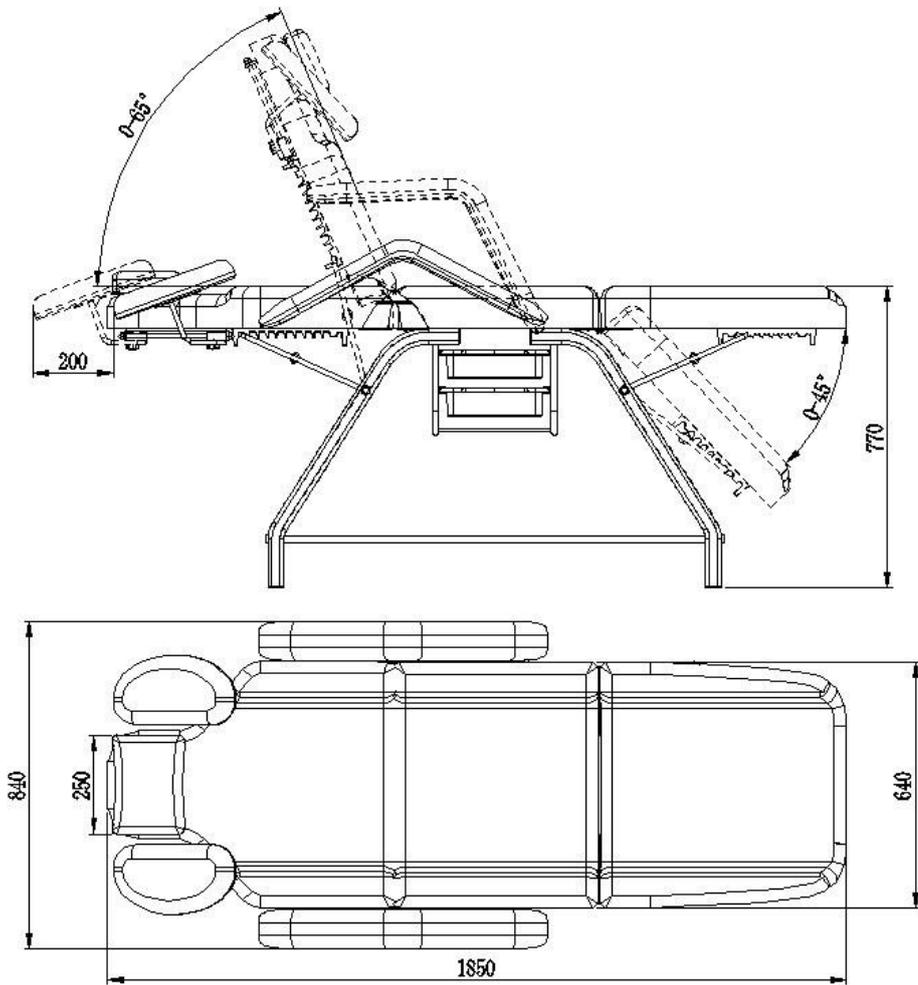


Installationsanleitung für das Gerät:

Montieren Sie den Stuhlrahmen. Legen Sie die Liege auf eine ebene, stabile Fläche und schrauben Sie dann den Stuhlrahmen an der Liege fest. Setzen Sie nacheinander den flachen Träger (1), dann das Verbindungsstück (2) und die Schraube (3) ein.

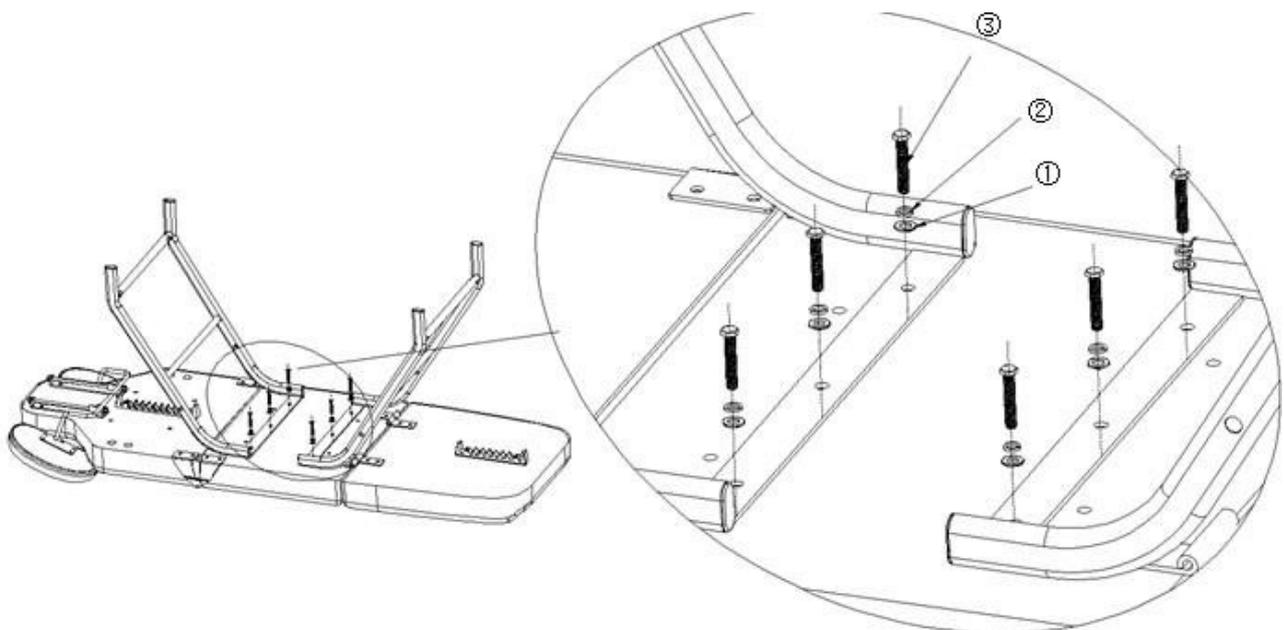


Bringen Sie die Tablettstütze an:


Setzen Sie die Tablettstütze auf den Rahmen und befestigen Sie sie mit Schrauben.

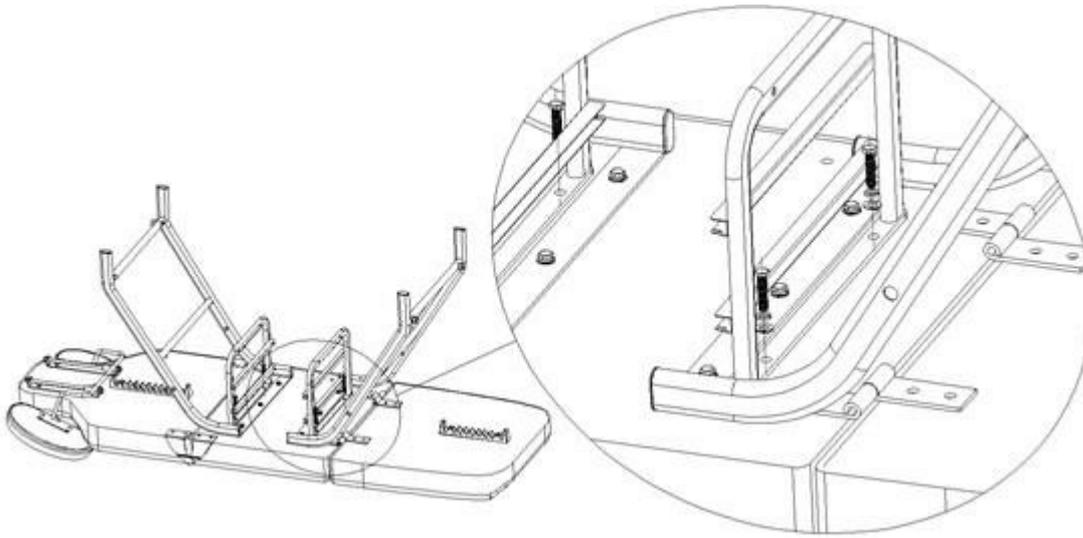

Verbinden Sie dann die Halterung des Tablett mit dem Verbindungsrohr und schrauben Sie sie fest, wie auf dem Foto unten gezeigt.

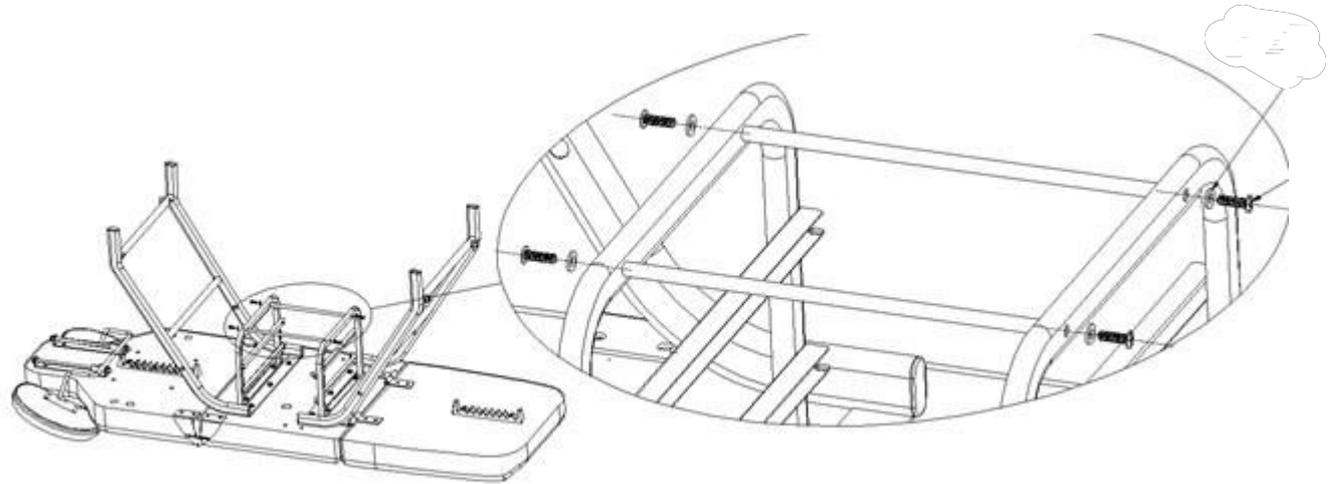


Befestigen Sie die Verbindungsstange des Stuhlrahmens: Befestigen Sie die Verbindungsstange mit Schrauben an

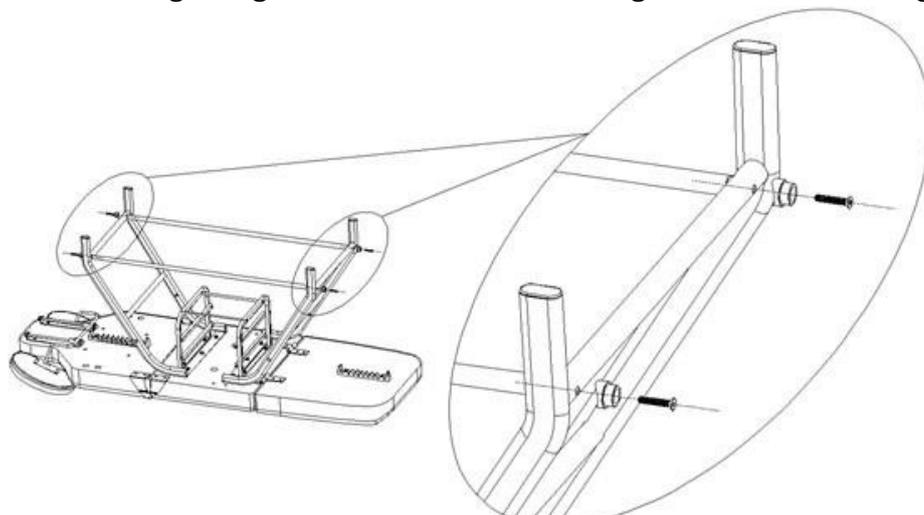


den 4 Löchern in den Stuhlbeinen.

Montieren Sie die Rückenlehnen- und Fußstützenversteller auf beiden Seiten der Stuhlbeine mit Schrauben.

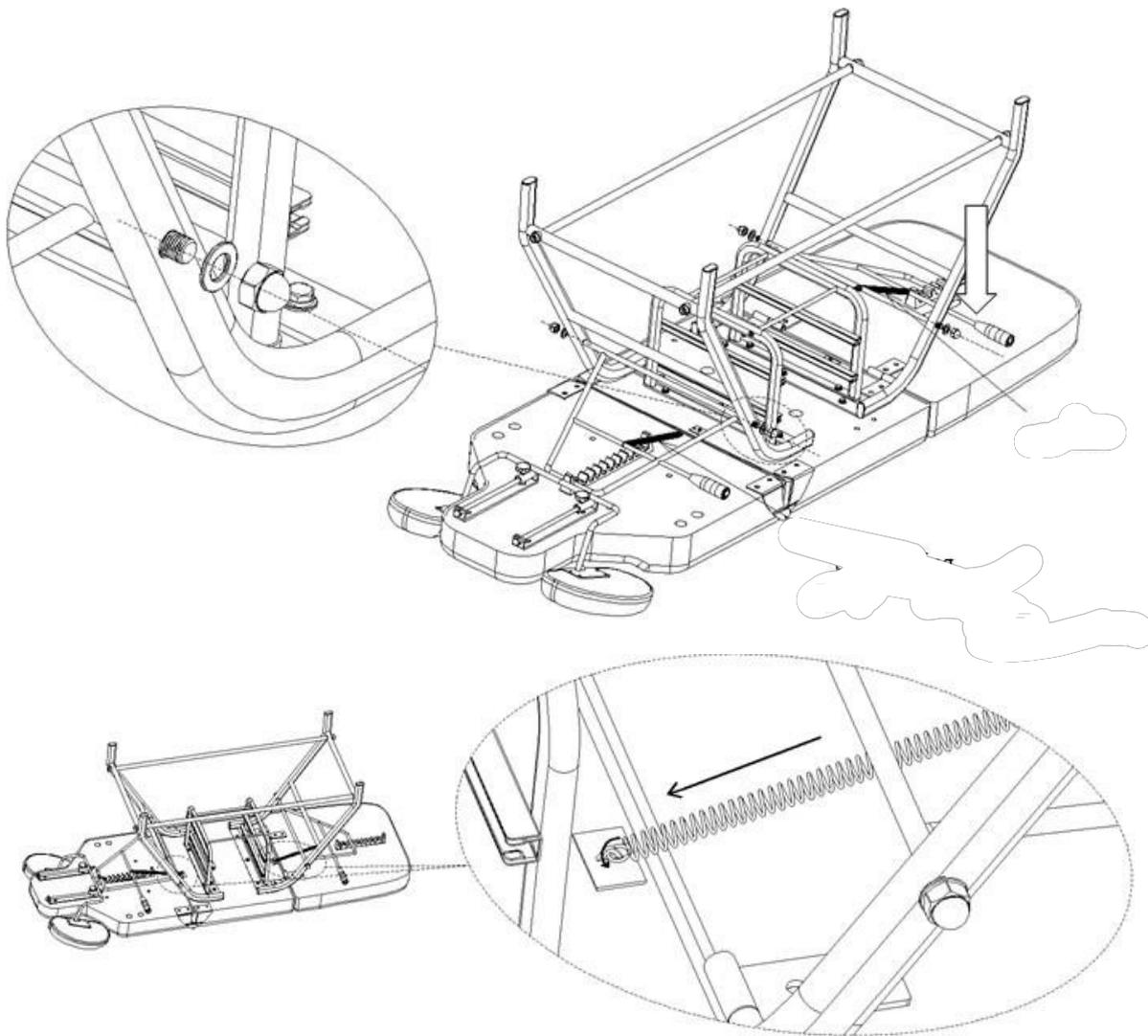


Armlehnenknopf einbauen

Richten Sie den Knopf auf das Befestigungsloch der Armlehne und ziehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Lösen Sie den Knopf, um die Position der Armlehne wie in der Abbildung gezeigt zu verschieben.

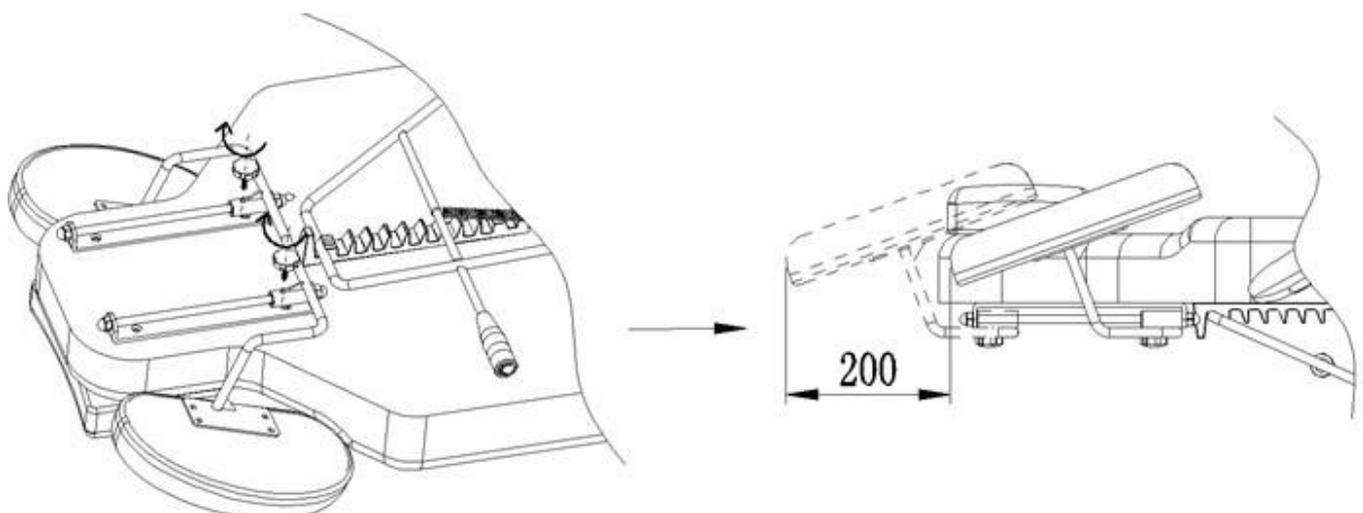


Einbau der Armlehne:

Schieben Sie die Armlehne in das Loch an der Seite der Rückenlehne. Die Armlehne sollte sicher befestigt sein. Drehen Sie sie im oder gegen den Uhrzeigersinn, damit sie richtig einrastet.

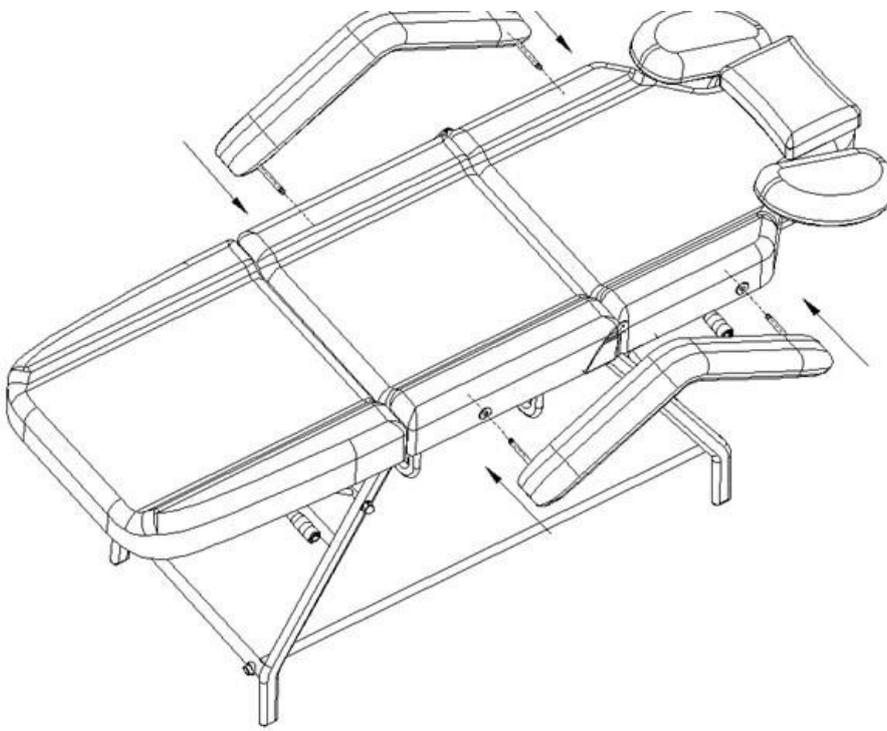

Setzen Sie den Behälter wie in der Abbildung unten gezeigt ein. Schieben Sie den Behälter in die Führungen unter dem Sitz.

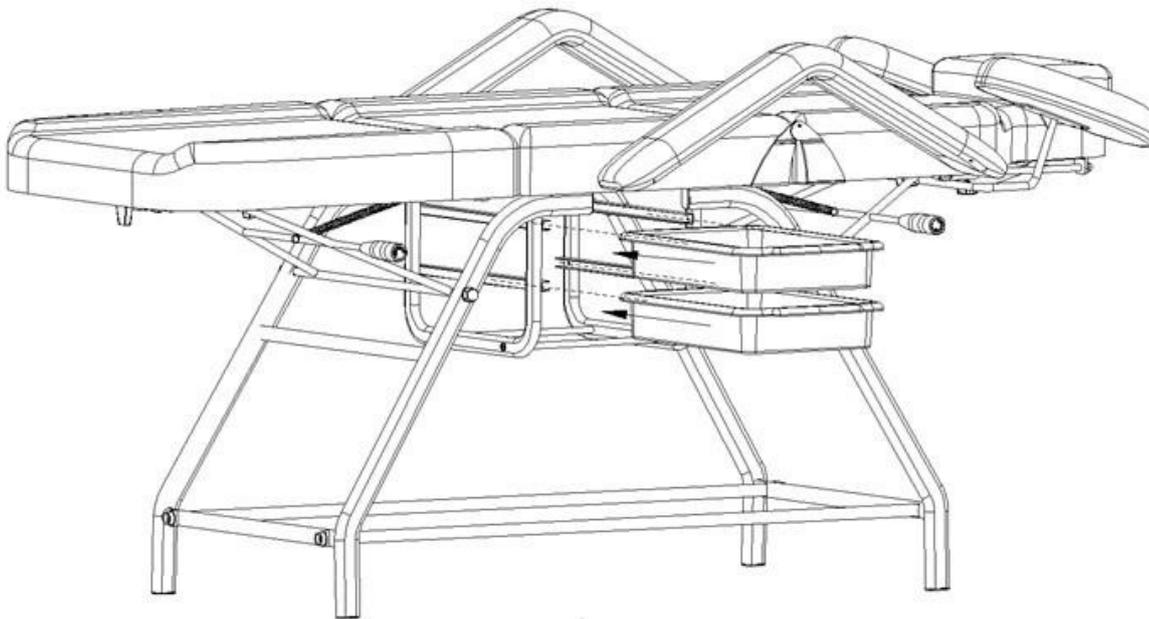

Funktionen des Vorsitzes:

1. Anheben der Rückenlehne

Die Neigung der Rückenlehne und der Fußstütze kann mit einem Handhebel eingestellt werden. Sowohl die Rückenlehne als auch die Fußstütze sind mit separaten Hebeln ausgestattet, so dass die Höhe jedes Teils separat eingestellt werden kann. Auf diese Weise kann der Stuhl individuell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden, um die Behandlung so bequem wie möglich zu gestalten. Der Stuhl kann bis in die Liegeposition ausgefahren werden.

Um die Rückenlehne zu erhöhen, heben Sie den Hebel an und stellen Sie ihn auf die gewünschte Höhe ein.

2. Absenken der Rückenlehne

Halten Sie die Rückenlehne des Sitzes fest, während Sie mit der anderen Hand den Griff des Hebels ergreifen und ihn bis zur gewünschten Position absenken. Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, lassen Sie den Hebel los.



Reinigung und Desinfektion des Geräts:

- Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen

- Zum Reinigen von Metall- und Kunststoffoberflächen und Bedienelementen wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch ab. Um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen, eignet sich eine kleine Bürste. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus nichtrostendem Stahl

- Am besten funktioniert die Reinigung mit einer milden Waschmittellösung. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen

- Verwenden Sie keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruck-Wasserkanonen) zur Reinigung.
- Reinigen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, und setzen Sie es keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Säuren.

IV Sitzfläche

- Wischen Sie die Sitzoberfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

Lösung von Problemen

Problem	Ursache	Lösungsmethoden
Seltene Geräusch während verwendet	Lose Schraube	Ziehen Sie die Schraube an

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Effekte während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht demontiert oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche von sich gibt, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen wurde oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Stromkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

ANMERKUNGEN:

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Unterweisung in der sicheren Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und müssen daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C

°C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.