

ACTIVESHOP®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Αισθητική πολυθρόνα 557A με κυβέτες



Εισαγωγέας:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Πολωνία

www.activeshop.com.pl

Αναθ. Α/04/2024


Πριν χρησιμοποιήσετε την καρέκλα καλλυντικών, διαβάστε τις οδηγίες και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα λειτουργεί κανονικά.
3. Τοποθετήστε την καρέκλα καλλυντικών εκεί όπου θα χρησιμοποιηθεί.

Σημείωση! Τα παιδιά και τα άπειρα άτομα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται και δεν πρέπει να παίζουν κοντά στην καρέκλα καλλυντικών.


Διαστάσεις:



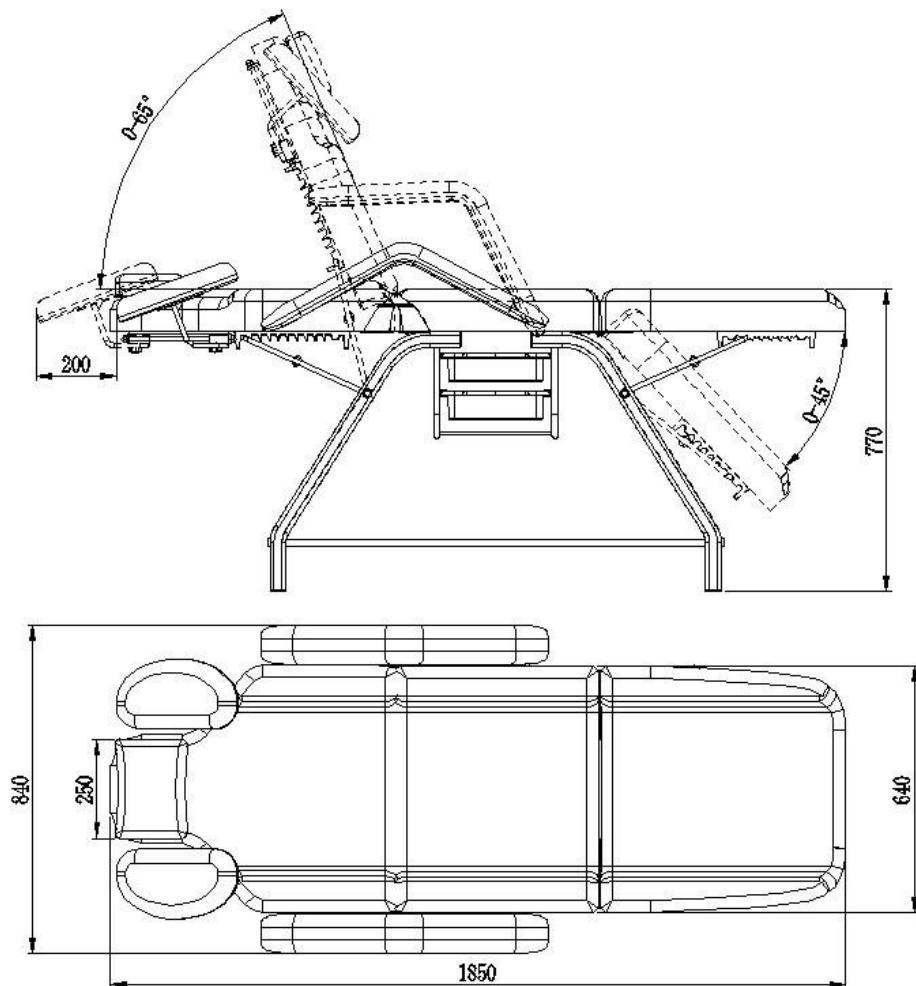


Οδηγίες εγκατάστασης για τη μονάδα:

Τοποθετήστε το πλαίσιο της καρέκλας. Τοποθετήστε τον καναπέ σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και, στη συνέχεια, στερεώστε το πλαίσιο της καρέκλας στον καναπέ με βίδες. Τοποθετήστε διαδοχικά τον επίπεδο φορέα (1), στη συνέχεια τον σύνδεσμο (2) και τη βίδα (3).

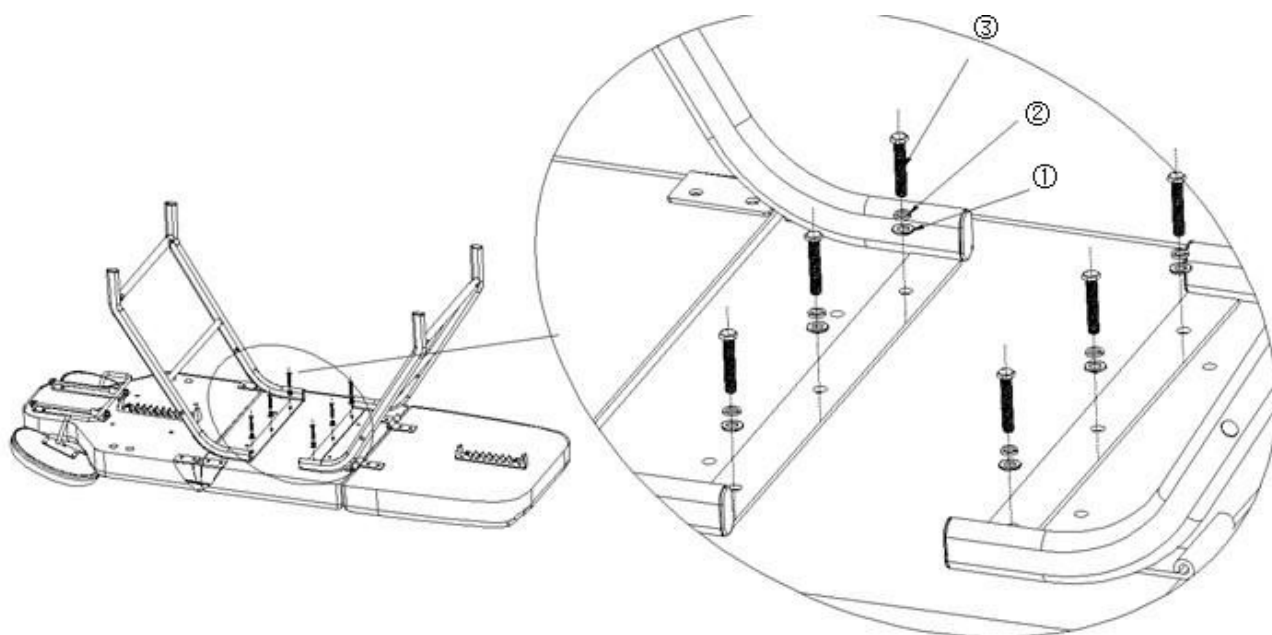


Τοποθετήστε το στήριγμα του δίσκου:


Τοποθετήστε το στήριγμα του δίσκου στο πλαίσιο και στερεώστε το με βίδες.

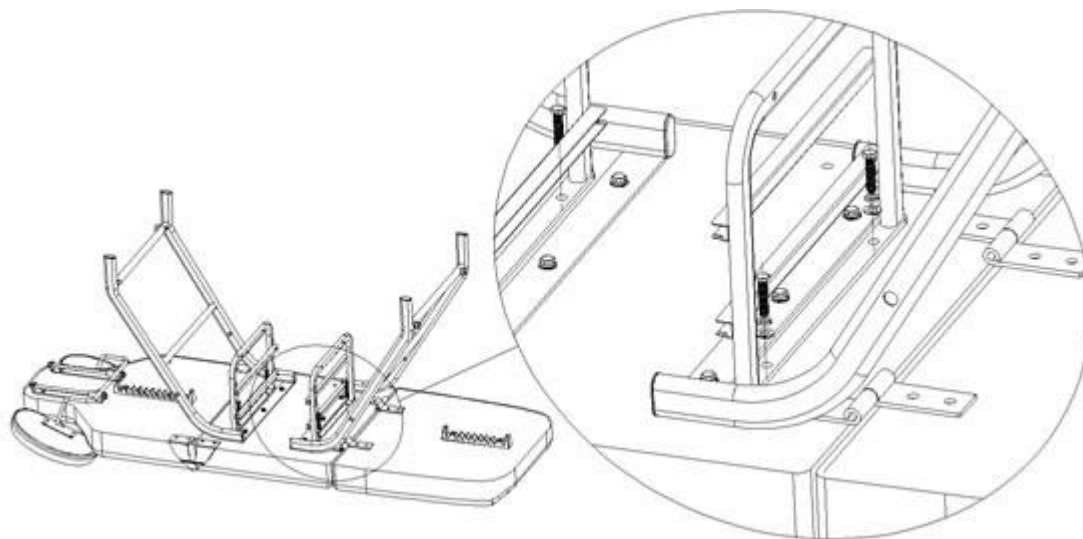

Στη συνέχεια, συνδέστε το στήριγμα του δίσκου στο σωλήνα σύνδεσης και σφίξτε το με βίδες, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

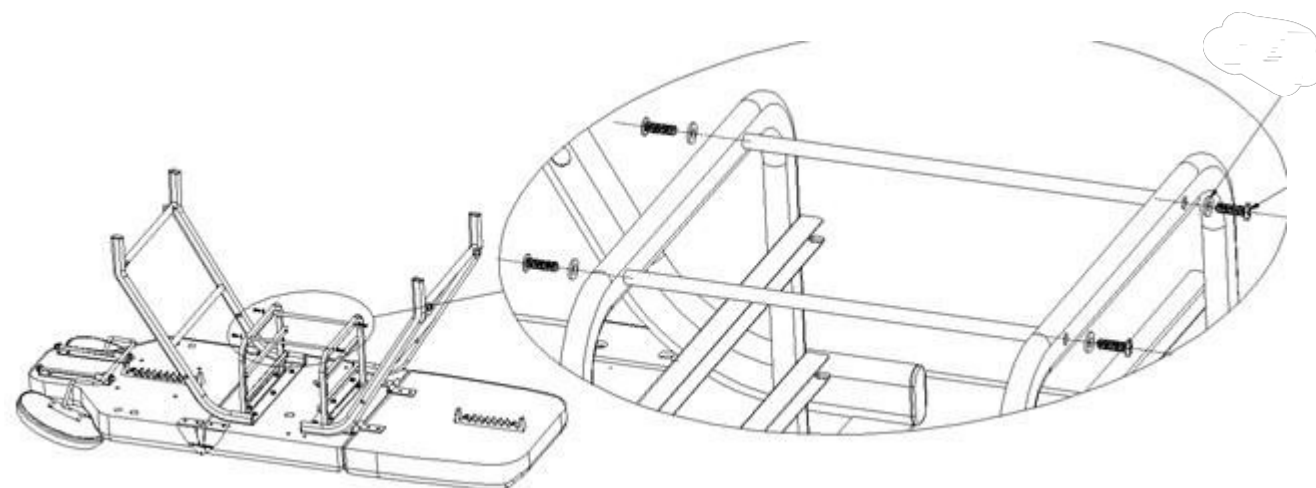


Στερεώστε τη ράβδο σύνδεσης του σκελετού της καρέκλας: στερεώστε τη ράβδο σύνδεσης στις 4 οπές στα πόδια

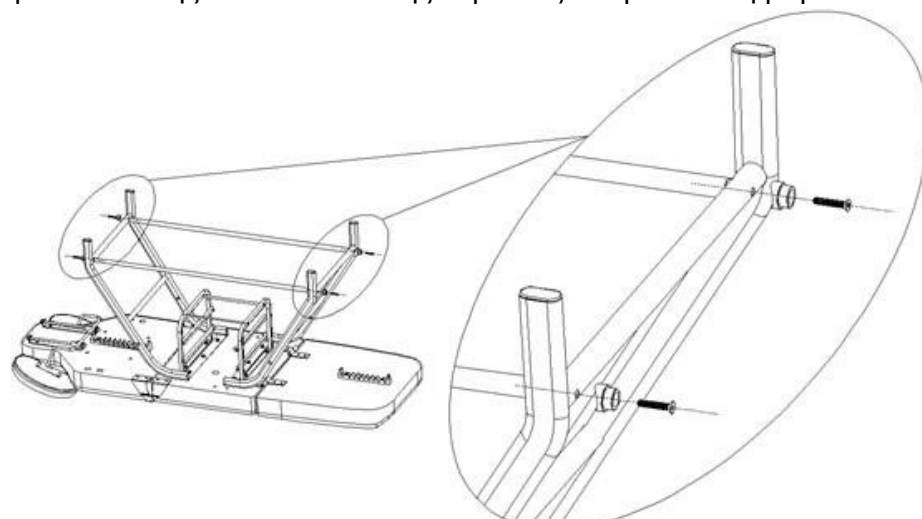


της καρέκλας, χρησιμοποιώντας βίδες.

Τοποθετήστε τους ρυθμιστές πλάτης και υποπόδι και στις δύο πλευρές των ποδιών της καρέκλας με βίδες.

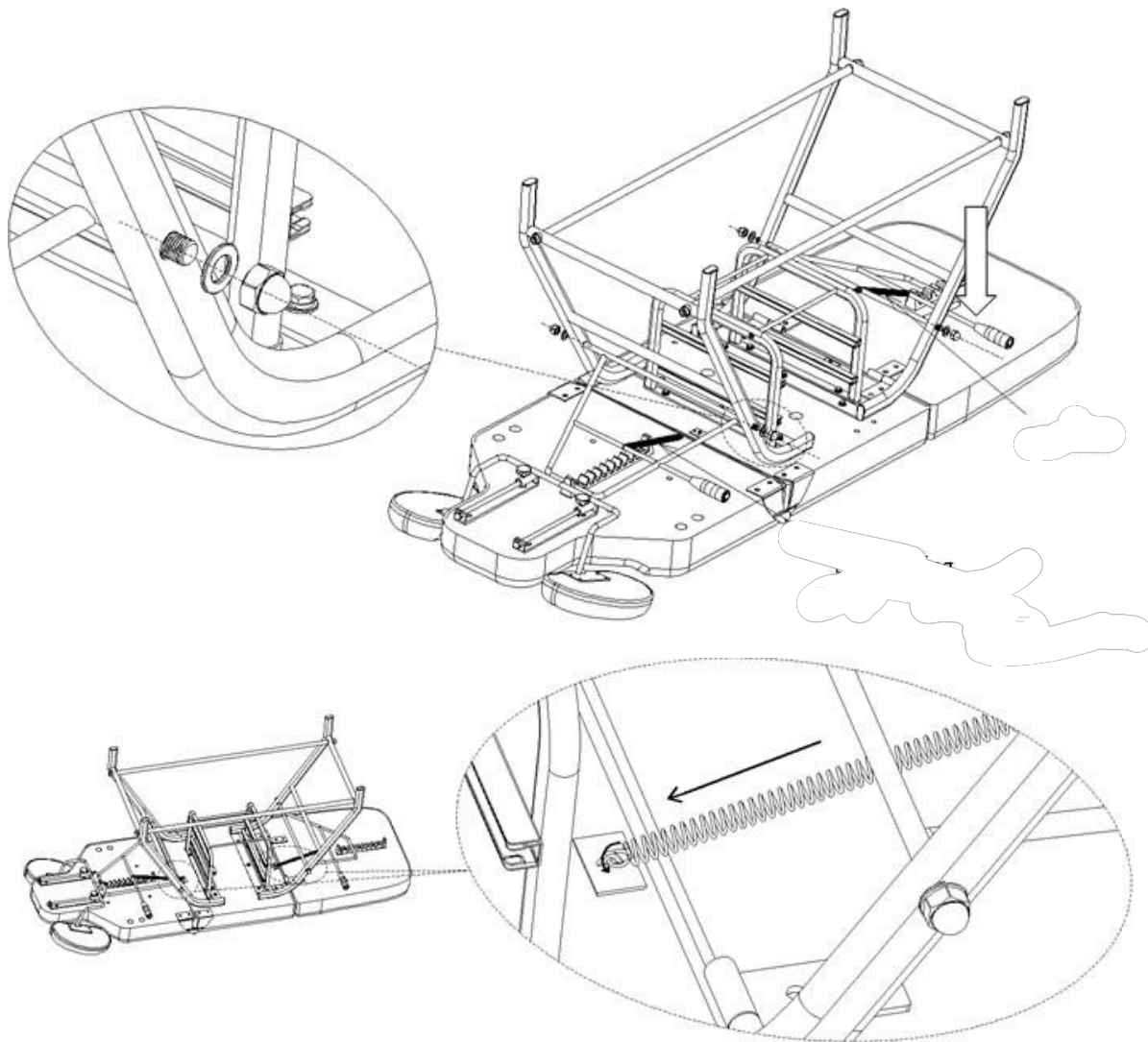


Εγκαταστήστε το κουμπί του μπράτσου

Στρέψτε το κουμπί στην οπή τοποθέτησης του μπράτσου και σφίξτε το δεξιόστροφα. Χαλαρώστε το κουμπί για να μετακινήσετε τη θέση του μπράτσου όπως φαίνεται στην εικόνα.

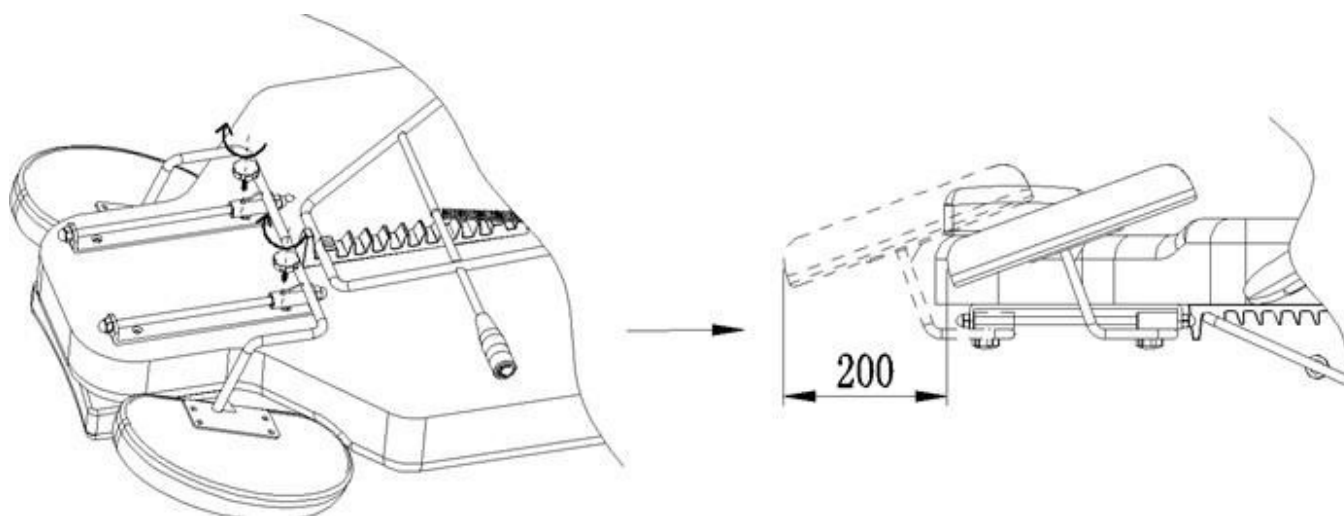


Εγκατάσταση μπράτσου:

Σύρετε το μπράτσο στην οπή που βρίσκεται στο πλάι της πλάτης. Το μπράτσο πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια. Στρίψτε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, ώστε να μπει σωστά στη θέση του.

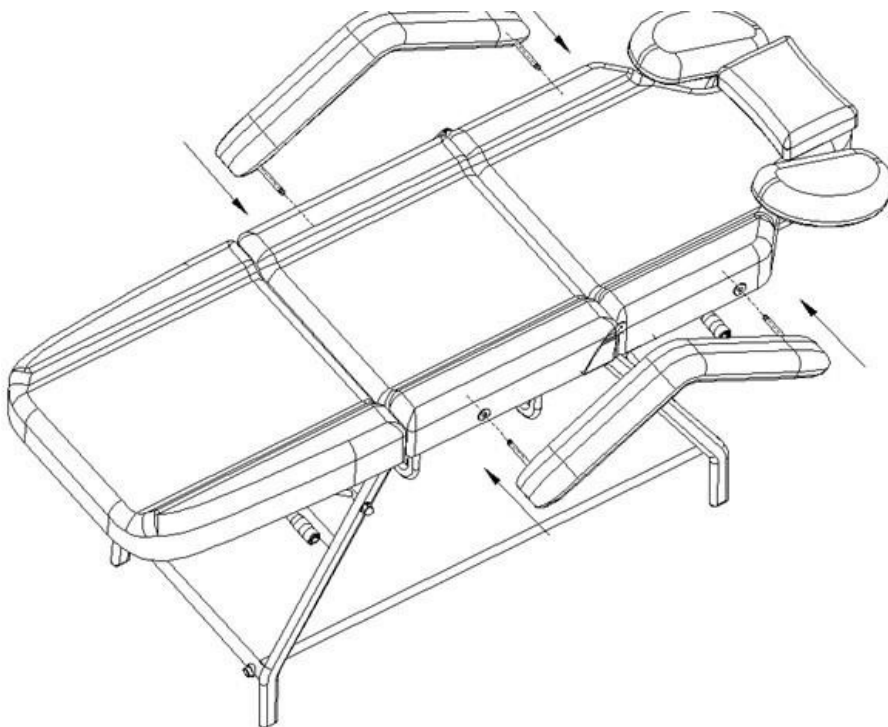

Εγκαταστήστε το δοχείο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Σύρετε το δοχείο στους οδηγούς που βρίσκονται κάτω από το κάθισμα.

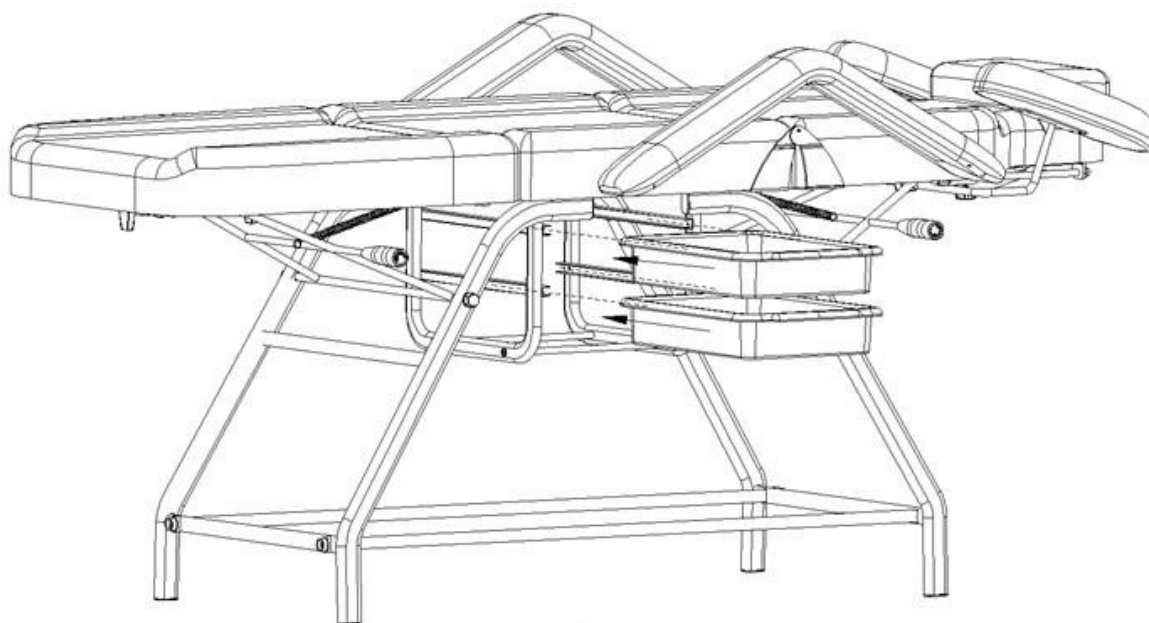

Λειτουργίες καρέκλας:

1. Ανύψωση της πλάτης

Η ρύθμιση των γωνιών στις οποίες βρίσκονται η πλάτη και το υποπόδιο είναι δυνατή με τη χρήση ενός χειροκίνητου μοχλού. Τόσο η πλάτη όσο και το υποπόδιο διαθέτουν ξεχωριστούς μοχλούς, έτσι ώστε το ύψος του κάθε μέρους να μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά. Αυτό επιτρέπει την ατομική προσαρμογή της καρέκλας στις ανάγκες του πελάτη, ώστε η θεραπεία που πραγματοποιείται να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη. Η καρέκλα μπορεί να επεκταθεί μέχρι τη θέση ανάκλισης.

Για να ανασηκώσετε την πλάτη, πιάστε το μοχλό και ανασηκώστε την και ρυθμίστε την στο ύψος που προτιμάτε.

2. Χαμηλώνοντας την πλάτη

Κρατήστε την πλάτη του καθίσματος, ενώ με το άλλο χέρι πιάνετε τη λαβή του μοχλού και κατεβάστε τον προς τα κάτω μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θέση. Όταν φτάσετε στο επιθυμητό ύψος, αφήστε το μοχλό.



Καθαρισμός και απολύμανση της μονάδας:

- Για να διατηρηθεί η επιφάνεια της καρέκλας σε καλή κατάσταση, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Να θυμάστε να καθαρίζετε και να απολυμαίνετε την καρέκλα μετά από κάθε χρήση. Συνιστάται να κάνετε μια σχολαστική απολύμανση μία φορά το μήνα.

I Μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες

- Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες και τα χειριστήρια, σκουπίστε τα με ένα υγρό πανί. Για να καθαρίσετε δυσπρόσιτες περιοχές ή γωνίες, μια μικρή βούρτσα θα λειτουργήσει καλά. Μην χρησιμοποιείτε πολύ υγρό για να καθαρίσετε τη συσκευή. Στη συνέχεια, απολυμάνετε τη συσκευή με ένα κατάλληλο υγρό.

II Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

- Ο καθαρισμός με ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού θα λειτουργήσει καλύτερα. Η αμμωνία και οι περισσότεροι διαλύτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση σκληρών λεκέδων. Αποφύγετε τα διαλύματα με βάση το χλώριο.

III Βαμμένες ή επιχρωμιωμένες μεταλλικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πίδακες νερού (ντους, κανόνια νερού υψηλής πίεσης) για τον καθαρισμό.
- Μην καθαρίζετε σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία και μην εκθέτετε τη μονάδα σε συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε μόλυνση από υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή οξέα για τον καθαρισμό.

IV Επιφάνεια καθίσματος

- Σκουπίστε ομοιόμορφα την επιφάνεια του καθίσματος με ένα ειδικό καθαριστικό δέρματος και στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Μέθοδοι επίλυσης
Παράξενο θόρυβος κατά τη διάρκεια χρήσης	Χαλαρή βίδα	Σφίξτε τη βίδα

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή είναι επαγγελματικός εξοπλισμός για χρήση σε αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η λειτουργία της συσκευής μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό αισθητικής αποφεύγει ανεπιθύμητα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Μην εγκαθιστάτε και μη λειτουργείτε τη μονάδα κοντά σε υγρά, υγρές περιοχές ή με βρεγμένα χέρια - ώστε να μην εισέρχονται υγρά στη μονάδα.
4. Αποσυνδέστε αμέσως το φισ από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις που παρέχει η ACTIVESHOP Ltd. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, β) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
5. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε τις εργασίες με τη μονάδα.
7. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η μονάδα ενδέχεται να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
9. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
10. Το τροφοδοτικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η συσκευή να δυσλειτουργήσει, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος.
2. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και γνώσης του εξοπλισμού, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδια με παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η εσφαλμένη χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει στο θάνατο, επομένως η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τις συσκευασίες σε κέντρα ανακύκλωσης σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου εξοπλισμού. Προκειμένου να προστατευθούν

περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και στη συνέχεια να παραδίδονται στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους και οι παλιές συσκευές περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα και πρέπει συνεπώς να αποστέλλονται για ανακύκλωση. Επομένως, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην ACTIVESHOP Ltd.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Η μονάδα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία που δεν υπερβαίνει το 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C

°C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η μονάδα δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, ούτε να υποβάλλεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικές επιδράσεις.