

ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Sillón cosmético 557A con cubetas



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024


Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones y siga estos pasos:

1. Asegúrese de que se han retirado todos los materiales de embalaje.
2. Asegúrese de que el asiento funciona correctamente.
3. Coloque el sillón cosmético donde vaya a utilizarlo.

Nota. Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben estar vigilados y no deben jugar cerca del sillón cosmético.


Dimensiones:



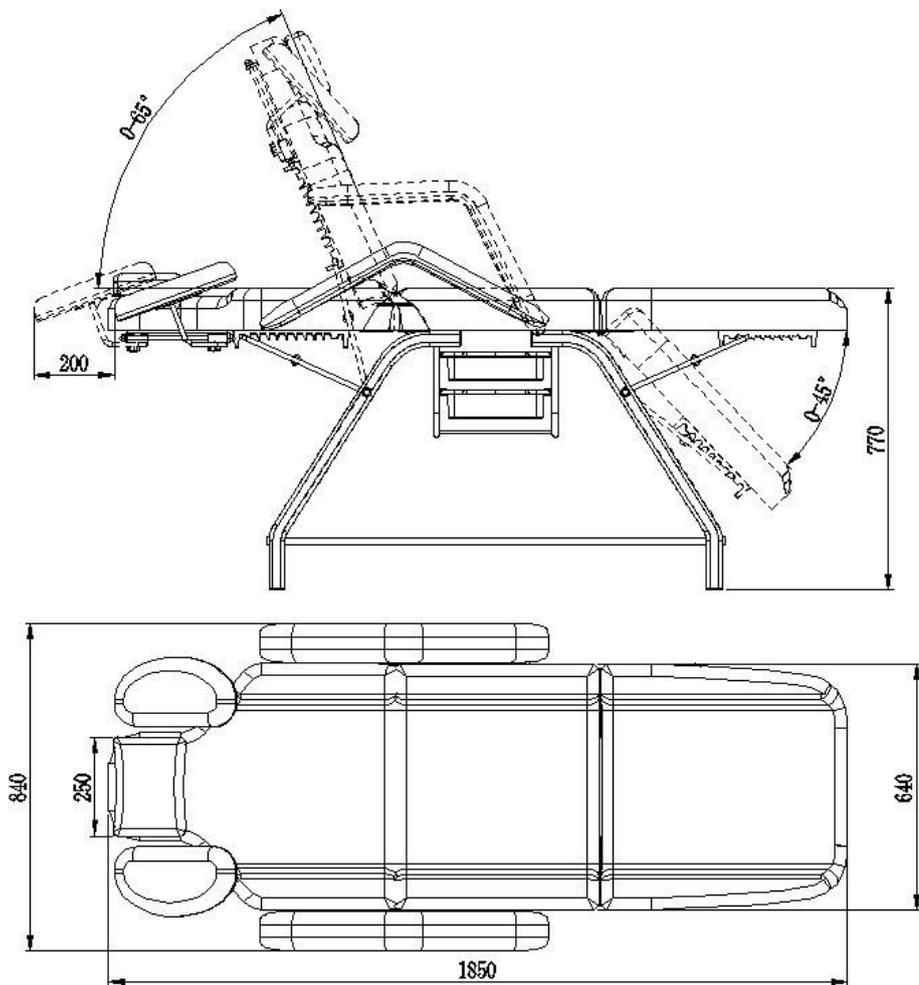


Instrucciones de instalación de la unidad:

Instale el armazón de la silla. Coloque la camilla sobre una superficie plana y estable y, a continuación, fije el armazón de la silla a la camilla con tornillos. Coloque el soporte plano (1), luego el conector (2) y el tornillo (3) en secuencia.

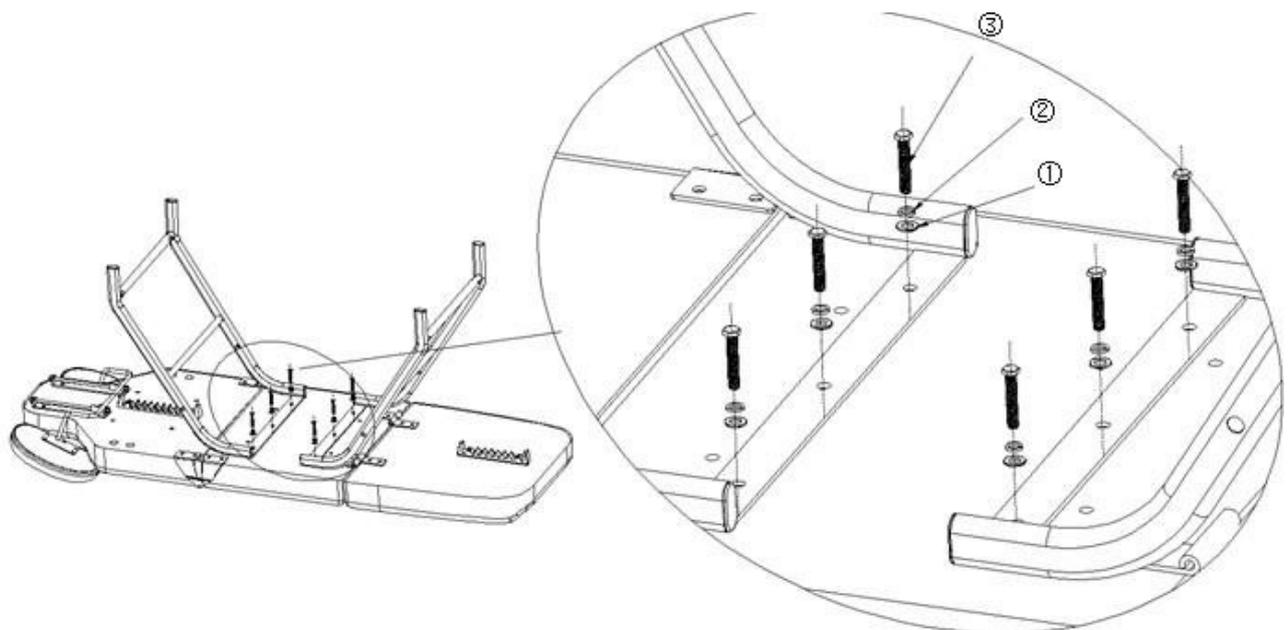


Instale el soporte de la bandeja:


Coloque el soporte de la bandeja en el marco y fíjelo con tornillos.

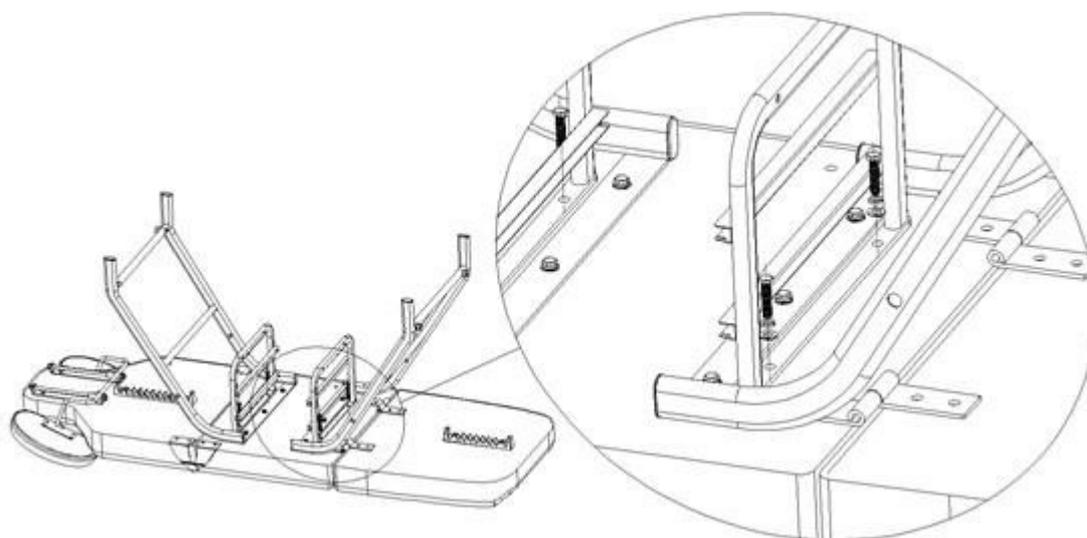

A continuación, conecte el soporte de la bandeja al tubo de conexión y apriételo con tornillos, como se muestra en la foto de abajo.

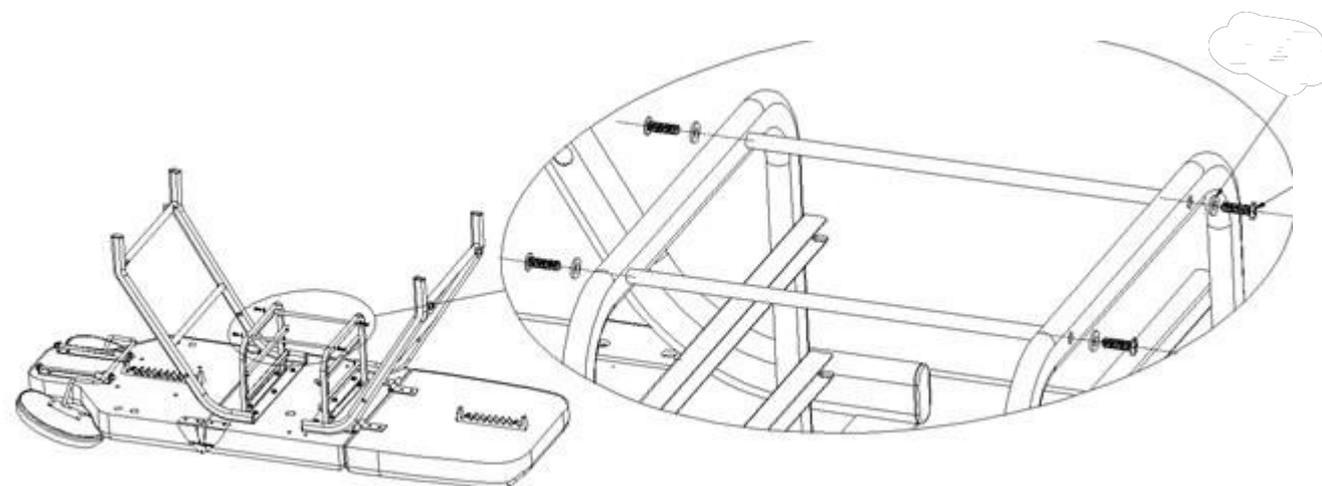


Fije la varilla de conexión del armazón de la silla: fije la varilla de conexión a los 4 orificios de las patas de la silla,

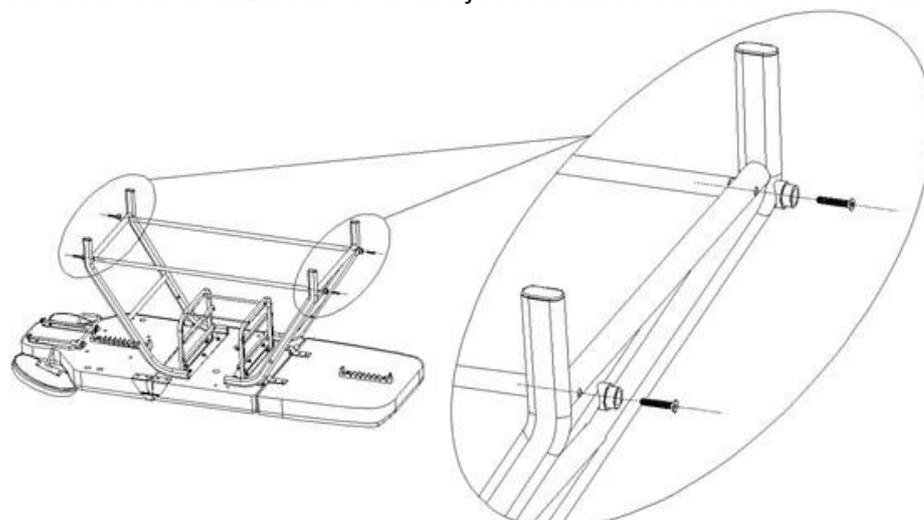


utilizando tornillos.

Instale los reguladores del respaldo y del reposapiés a ambos lados de las patas de la silla utilizando tornillos.

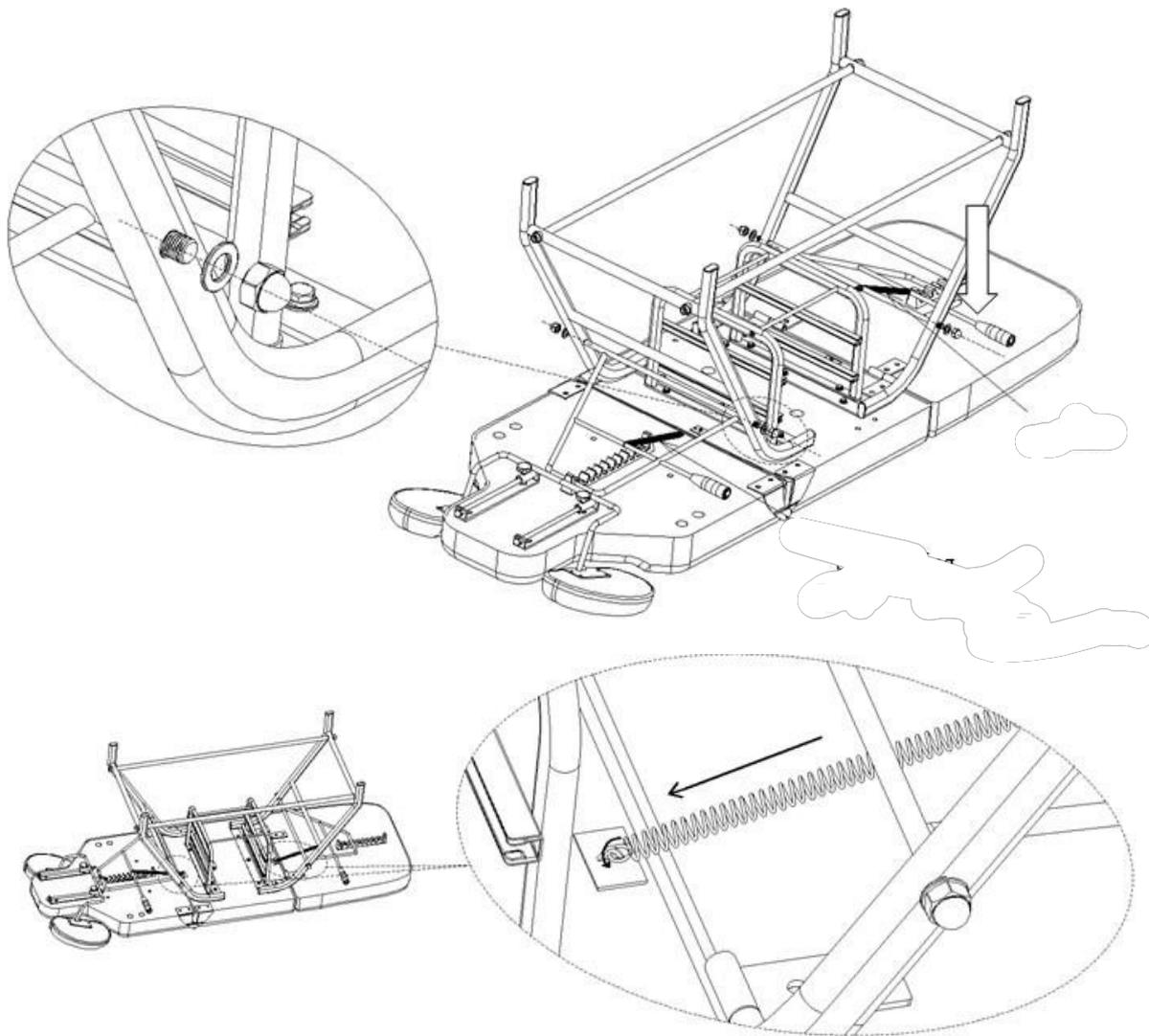


Instalar el pomo del reposabrazos

Apunte el pomo hacia el orificio de montaje del reposabrazos y apriételo en el sentido de las agujas del reloj. Afloje la perilla para mover la posición del apoyabrazos como se muestra en la imagen.

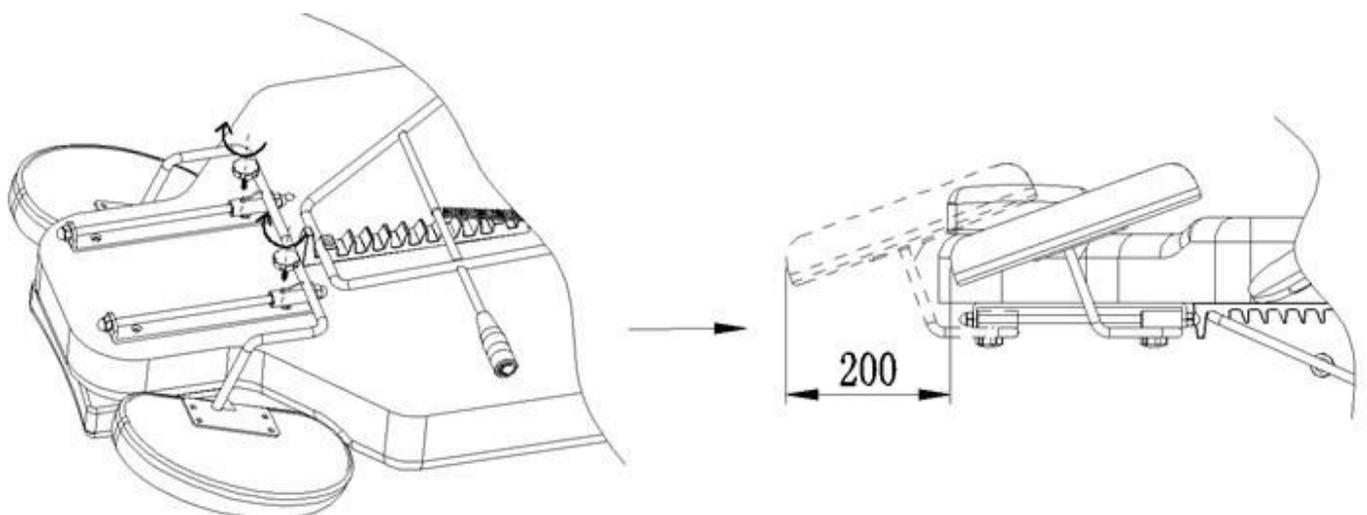


Instalación del reposabrazos:

Deslice el reposabrazos en el orificio situado en el lateral del respaldo. El reposabrazos debe quedar bien sujeto. Gírelo en sentido horario o antihorario para que encaje correctamente.

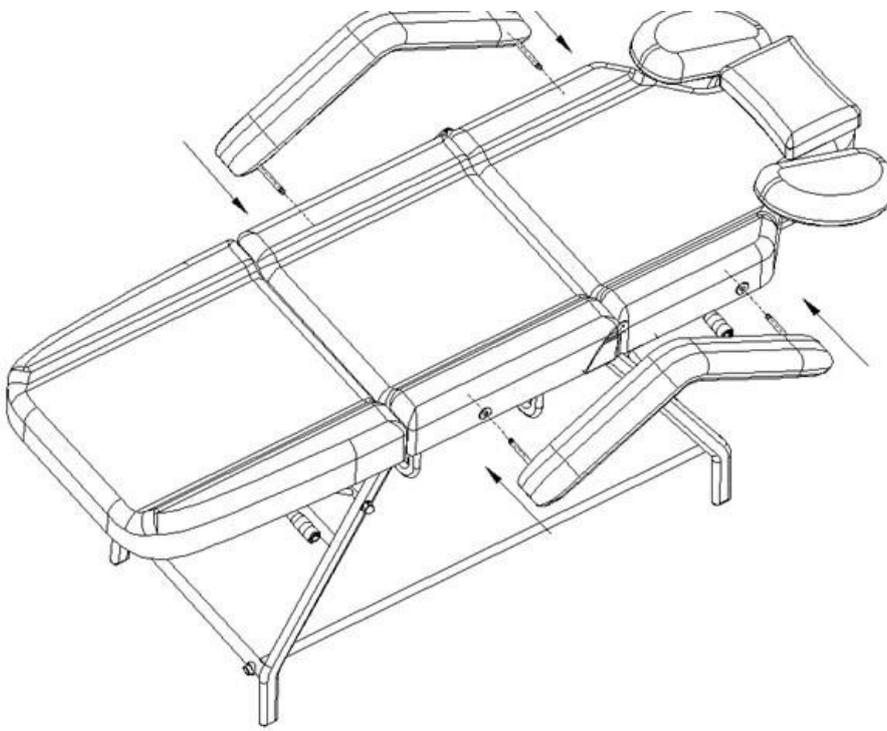

Instale el contenedor como se muestra en la imagen inferior. Deslice el contenedor en las guías situadas debajo del asiento.

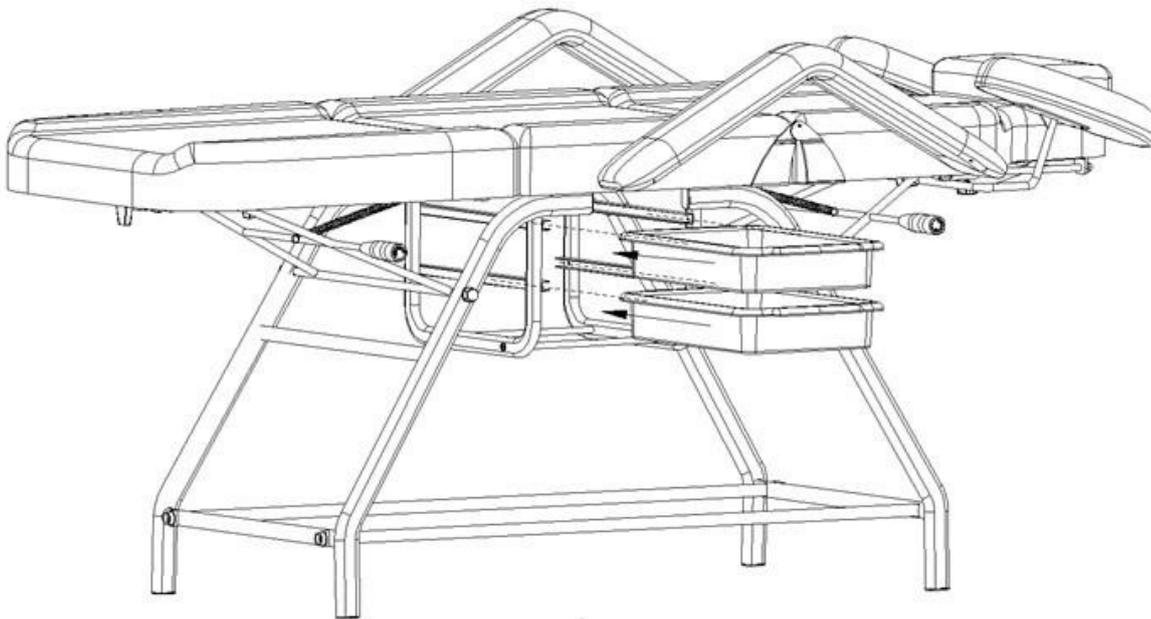

Funciones de presidente:

1. Elevación del respaldo

Los ángulos de inclinación del respaldo y el reposapiés pueden ajustarse mediante una palanca manual. Tanto el respaldo como el reposapiés disponen de palancas independientes, por lo que la altura de cada parte puede ajustarse por separado. Esto permite ajustar el sillón individualmente a las necesidades del cliente para que el tratamiento realizado sea lo más cómodo posible. El sillón puede extenderse hasta la posición reclinable.

Para elevar el respaldo, agarre la palanca y levántela, y ajústela a la altura que prefiera.

2. Bajar el respaldo

Sujete el respaldo del asiento mientras agarra la empuñadura de la palanca con la otra mano y bájela hasta alcanzar la posición deseada. Cuando haya alcanzado la altura que prefiera, suelte la palanca.



Limpieza y desinfección de la unidad:

- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies y los mandos de metal y plástico, pásales un paño húmedo. Para limpiar zonas o rincones de difícil acceso, un cepillo pequeño funcionará bien. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. El amoníaco y la mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de asiento

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásale un paño limpio y suave.

Resolución de problemas

Problema	Causa	Métodos de solución
Extraño ruido durante utiliza	Tornillo flojo	Apriete el tornillo

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. No se debe desmontar el aparato ni intentar utilizarlo para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice la unidad cerca de líquidos, zonas húmedas o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en la unidad.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
 - a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sufrido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale la unidad donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque la unidad sobre un carro, estantería o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

NOTAS:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.
2. Este equipo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo si se proporciona supervisión o instrucción sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger

medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse d e s p u é s a los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. La unidad debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, la unidad no debe arrojarse ni dejarse caer, ni someterse a golpes mecánicos o influencias atmosféricas.