

ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotel kosmetyczny 557A z kuwetami



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024


Przed użyciem fotela kosmetycznego zapoznaj się z instrukcją i wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
2. Upewnij się, że fotel jest sprawny.
3. Umieść fotel kosmetyczny w miejscu, gdzie będzie używany.

Wskazówka! Dzieci i niedoświadczone osoby nie mogą korzystać z tego urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane i nie mogą bawić się w pobliżu fotela kosmetycznego.


Wymiary:



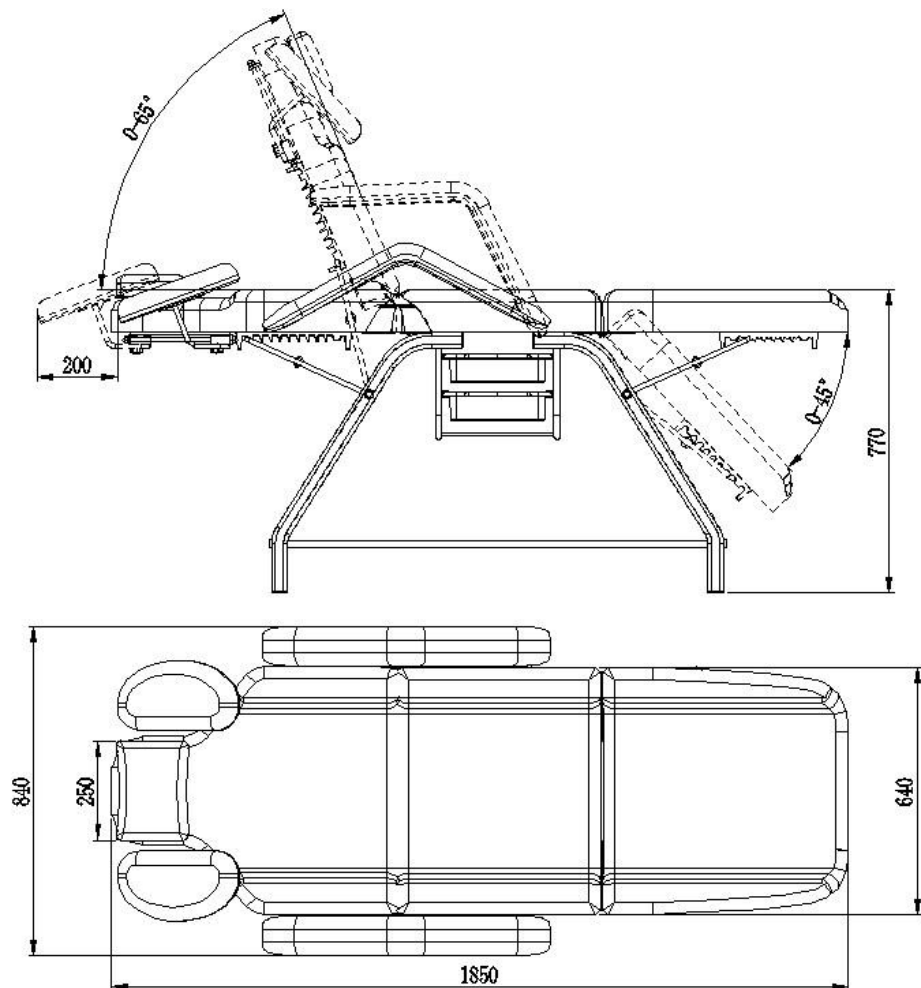


Instrukcja montażu urządzenia:

Zainstaluj stelaż fotela. Połóż leżankę na płaskiej, stabilnej powierzchni, następnie przymocuj stelaż fotela do leżanki za pomocą śrub. Umieść kolejno: płaski nośnik (1), następnie łącznik (2) i śrubę (3).

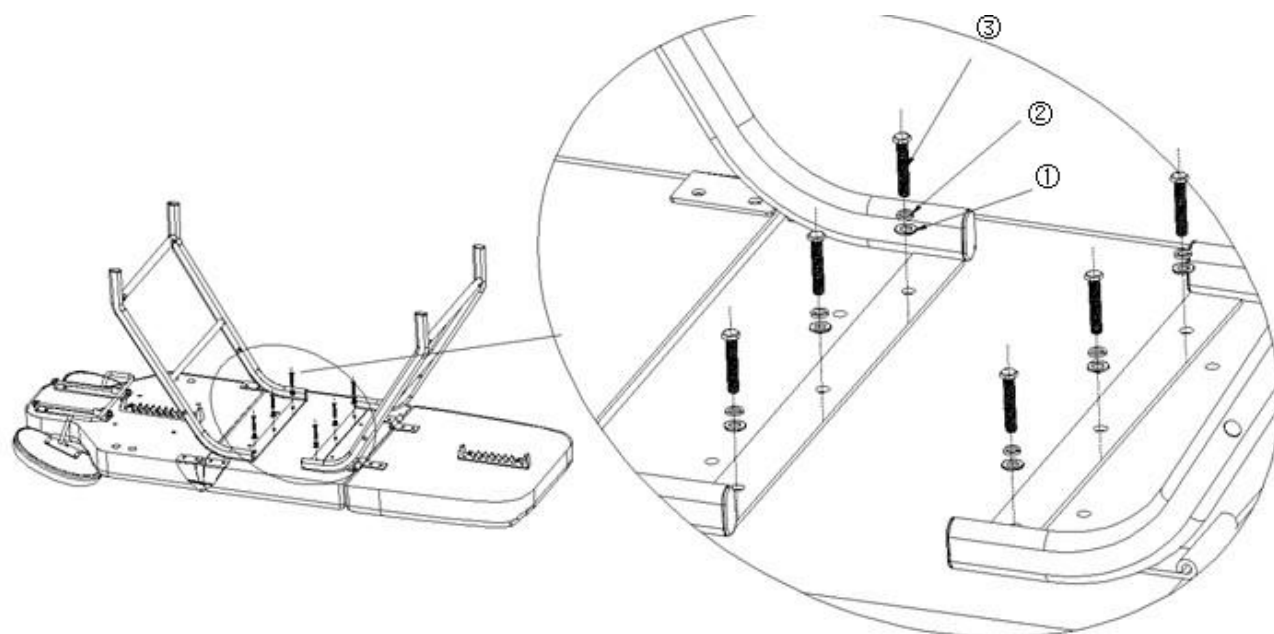


Zainstaluj wspornik tacki:


Nałóż wspornik tacy na stelaż i przymocuj go śrubami.

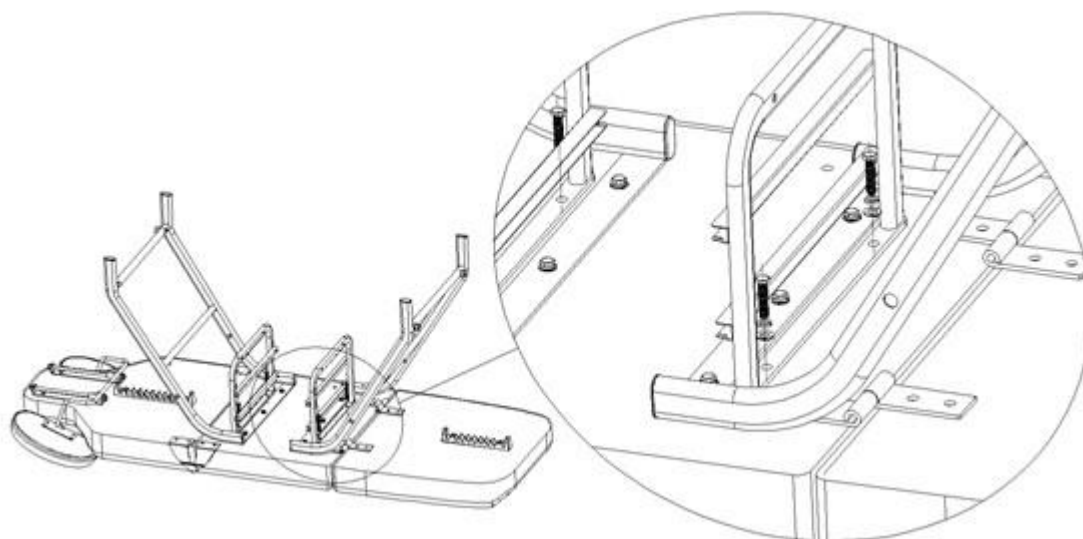


Następnie połącz wspornik tacy z rurą łączącą i dokręć go śrubami, jak na zdjęciu poniżej.

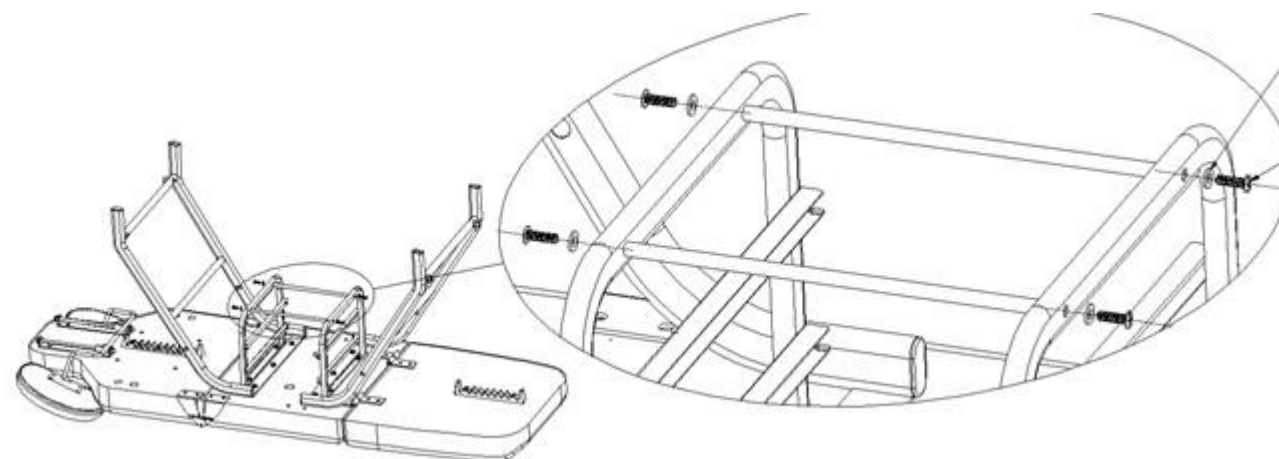

Zamocuj pręt łączący ramy fotela: przymocuj pręt łączący do 4 otworów w nogach fotela, za pomocą śrub.

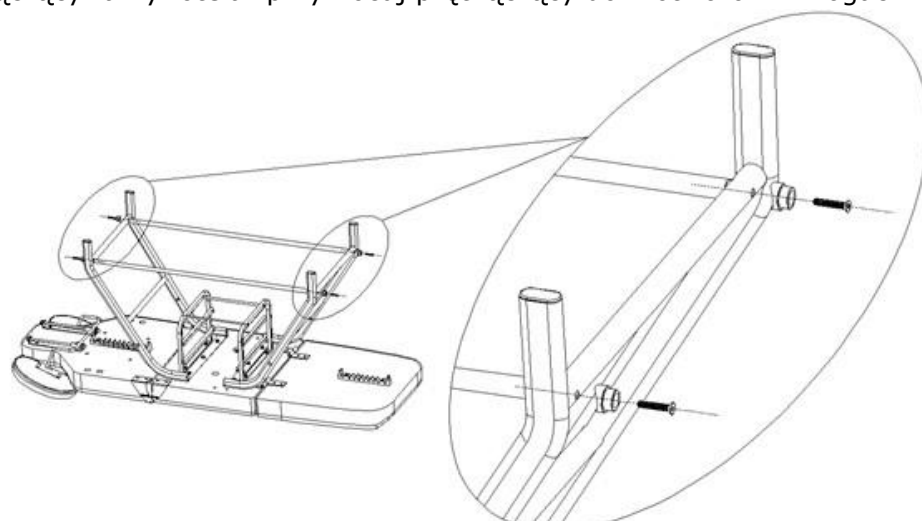


Zainstaluj regulator oparcia i podnóżka po obydwu stronach nóg fotela za pomocą śrub.

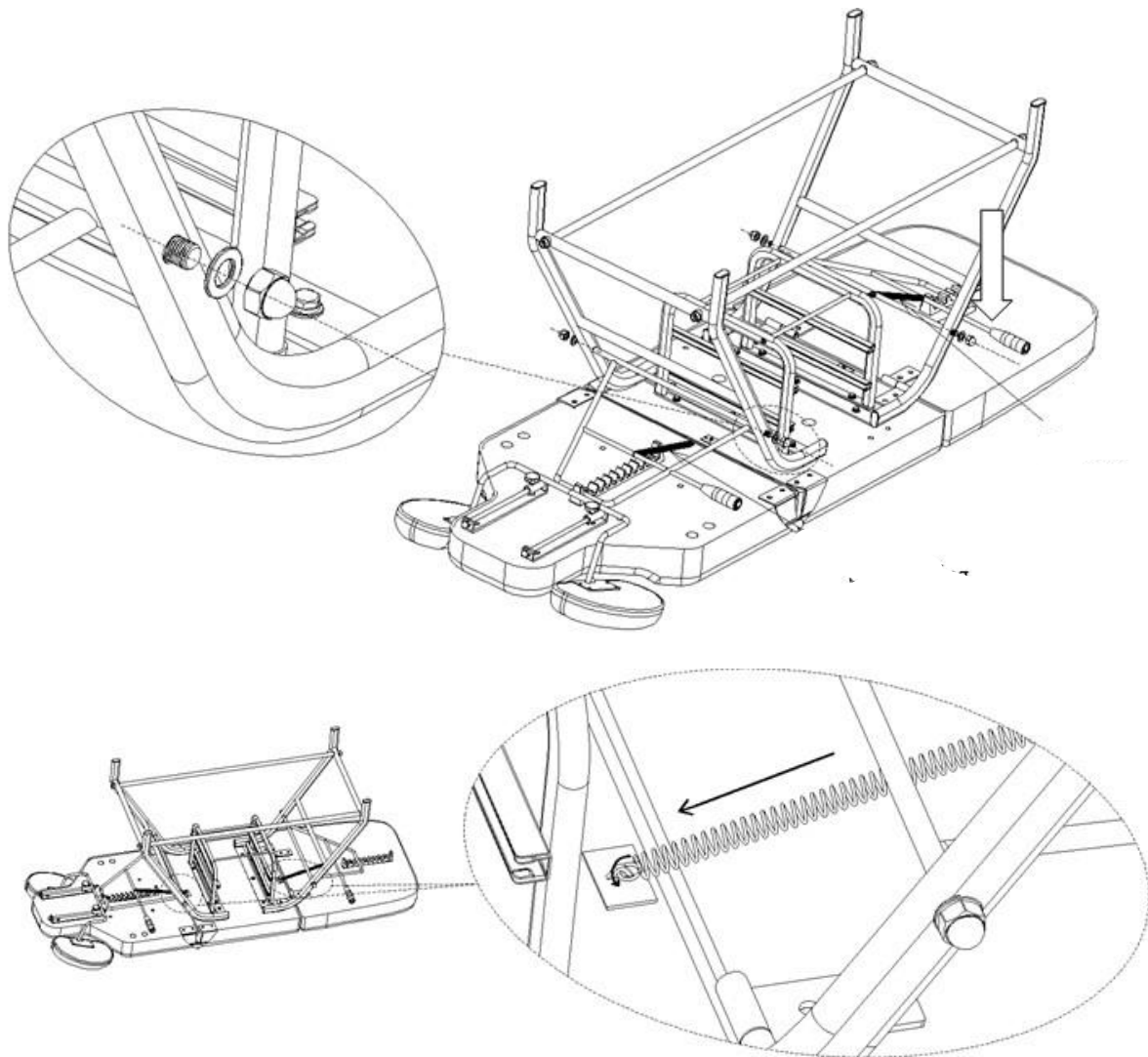

Zainstaluj pokrętko podłokietnika


Skieruj pokrętko na otwór montażowy podłokietnika, dokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Poluzuj pokrętko, aby przesunąć pozycję podłokietnika, jak na obrazku.

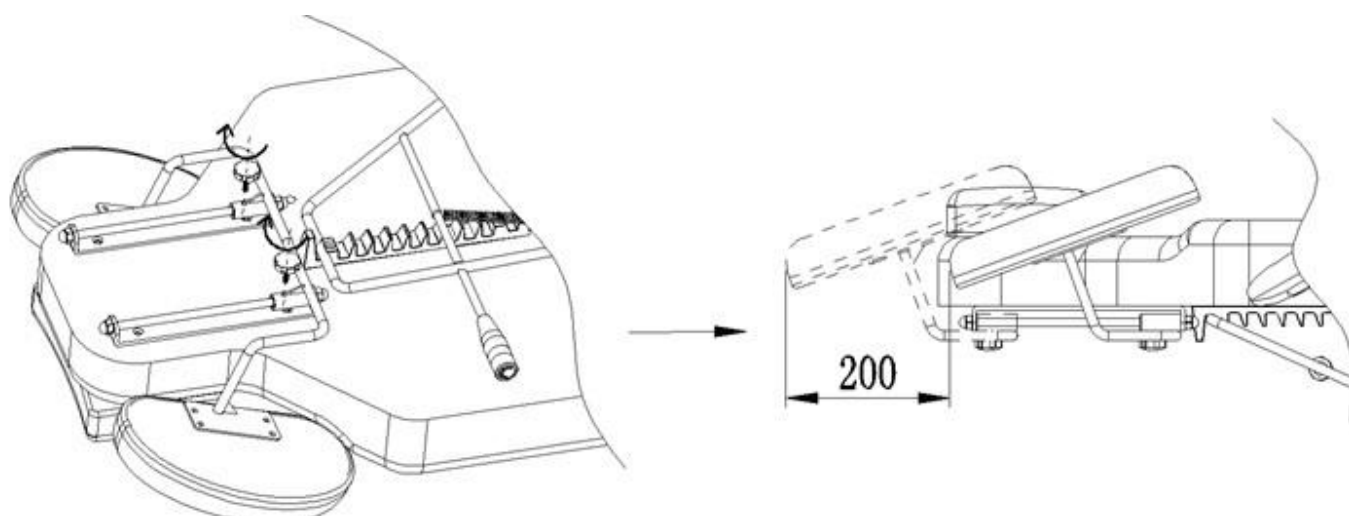


Instalacja podłokietnika:

Wsuń podłokietnik w otwór znajdujący się z boku oparcia. Podłokietnik powinien być stabilnie przymocowany. Przekręć go w prawo lub w lewo, aby odpowiednio wszedł na miejsce.

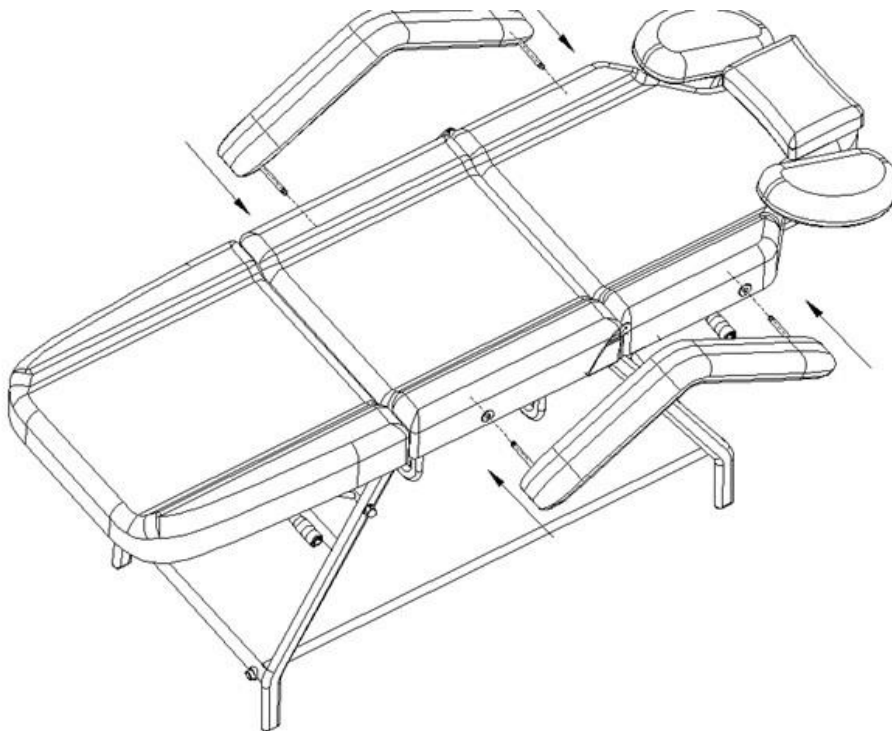

Zainstaluj pojemnik jak na poniższym zdjęciu. Wsuń pojemnik w prowadnice znajdujące się pod fotelem.

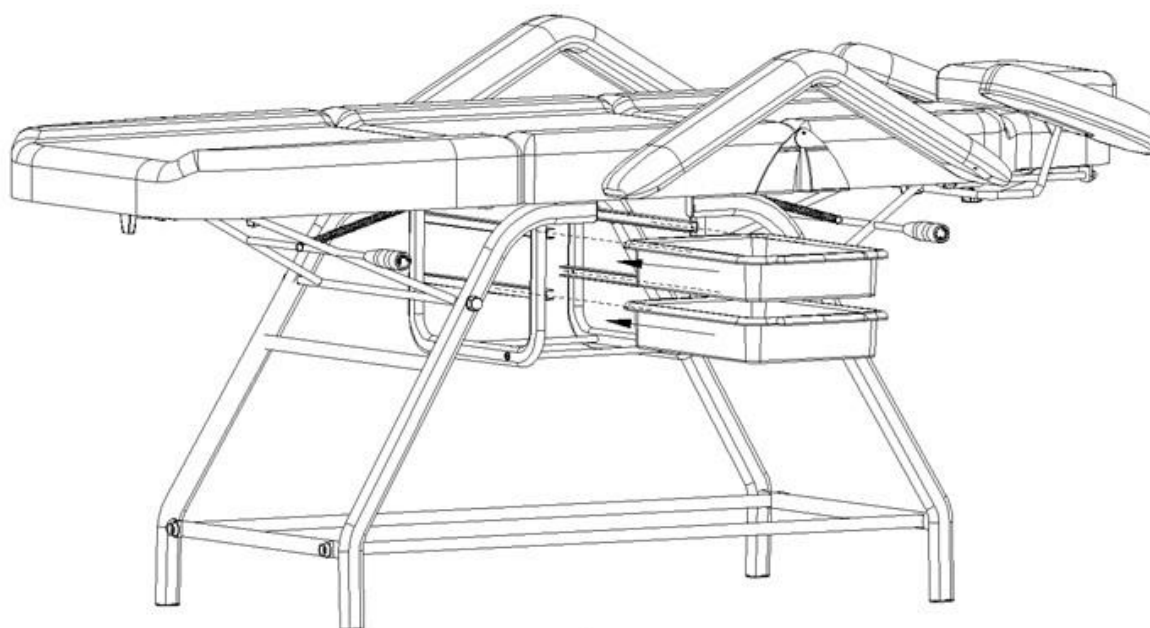

Funkcje fotela:

1. Podnoszenie oparcia

Regulacja katów pod którymi znajdują się oparcie i podnózek możliwa jest przy pomocy manualnej dźwigni. Zarówno oparcie jak i podnózek mają osobne dźwignie, dzięki czemu wysokość każdej części regulowana jest oddzielnie. Pozwala to na dostosowanie ustawienia fotela indywidualnie do potrzeb klienta, aby wykonywany zabieg był jak najbardziej komfortowy. Fotel można rozłożyć aż do pozycji leżanki.

Aby podnieść oparcie, chwyć za dźwignię i podnieś ją do góry, oraz ustaw na preferowanej wysokości.

2. Opuszczanie oparcia

Przytrzymaj oparcie fotela, a drugą ręką złap za uchwyt dźwigni i obniżaj ją w dół do osiągnięcia odpowiedniej pozycji. Po osiągnięciu preferowanej wysokości, puść dźwignię.



Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia:

- Aby utrzymać powierzchnię fotela w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić. Pamiętaj, aby czyścić i dezynfekować fotel po każdym użyciu. Zaleca się wykonać dokładną dezynfekcję raz w miesiącu.

I Powierzchnie metalowe i plastikowe

- Aby wyczyścić metalowe i plastikowe powierzchnie oraz elementy sterujące przetrzyj je wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc lub rogów dobrze sprawdzi się mała szczoteczka. Nie używaj zbyt dużej ilości płynu do czyszczenia urządzenia. Następnie zdezynfekuj urządzenie odpowiednim płynem.

II Powierzchnie ze stali nierdzewnej

- Najlepiej sprawdzi się czyszczenie łagodnym roztworem detergentu. Amoniak i większość rozpuszczalników mogą być stosowane do usuwania trudnych plam. Unikaj roztworów na bazie chloru.

III Malowane lub chromowane powierzchnie metalowe

- Nie używaj dysz wodnych (prysznic, wysokociśnieniowe armatki wodne) do czyszczenia.
- Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza, nie wystawiaj urządzenia na warunki, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia cieczą.
- Nie używaj rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia.

IV Powierzchnia fotela

- Wytrzyj powierzchnię fotela równomiernie specjalnym środkiem do czyszczenia skóry, a następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Metody rozwiązania
Dziwny hałas podczas użytkowania	Poluzowana śruba	Dokręć śrubę

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalania.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony

środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Po koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.